


# CPS Cordless Prosthodontic Screwdriver

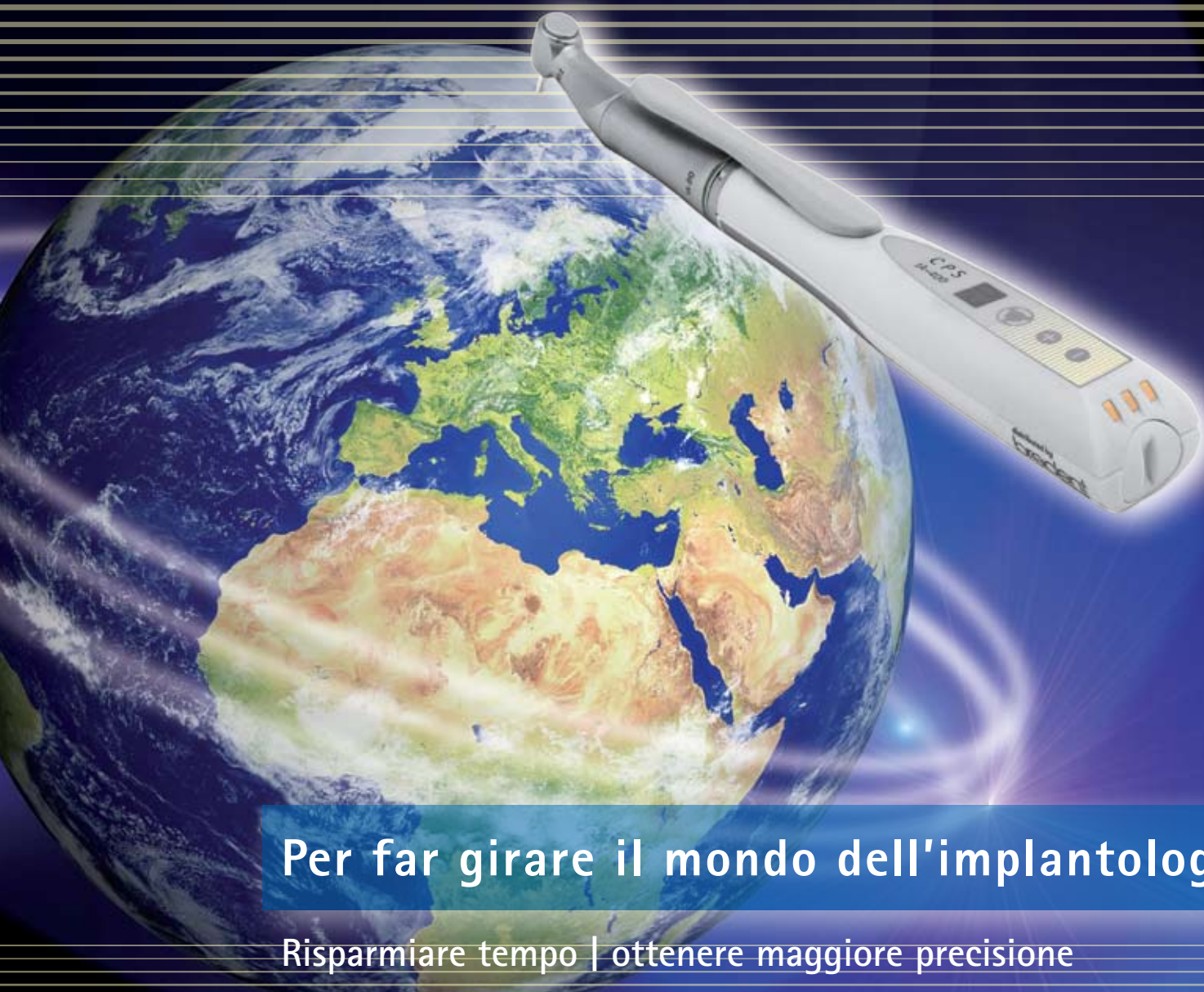

**Per far girare il mondo dell'implantologia**

Risparmiare tempo | ottenere maggiore precisione

**bredent**  
medical

# CPS Cordless Prosthodontic Screwdriver

## Impugnatura perfetta

- privo di cavo elettrico
- design ergonomico

## Elevata precisione

- Momento torcente preciso  
Precisione:  $\pm 5\%$
- Intervallo del momento torcente: 8 Ncm – 40 Ncm

## Migliore igiene

Contrangolo che non richiede manutenzione ed interruttore a dito rimovibile

- sterilizzabile in autoclave
- termodisinfettabile

## Universale

Con i cacciaviti dei più importanti sistemi implantari



## Quanto tempo Le occorre per svitare e fissare le viti protesiche?

Con il cacciavite CPS può risparmiare fino a ca. il 50 % del tempo.

## E' sicuro, di aver sempre avvitato correttamente le Sue viti protesiche?

Con il cacciavite CPS avrà sempre la certezza di un momento torcente corretto.

## Raggiunge tutte le viti con facilità?

Con il cacciavite CPS potrà raggiungere facilmente qualsiasi zona, meglio che con qualsiasi altro contrangolo, poichè è privo di cavo elettrico.

## Informazioni sul prodotto:

### CPS Cordless Prosthodontic Screwdriver

- motore privo di cavo elettrico
- batteria con una durata fino a 40 avvitiamenti
- base per la ricarica
- contrangolo 80:1
- cacciaviti:

Inbus

0,05 0,9 1.0 1.2 1.8 2.5

Torx

SKY 5.5 6.0

A taglio

1.6 2.0

REF 580 CPS4 0

Distributore per l'Italia:

bredent s.r.l. Via Roma 10 · 39100 Bolzano · Tel. 0471 / 469576 · Fax 0471 / 469573 · www.bredent.it · e-mail info@bredent.it